



## PROMEDANZ® S-MDI – ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с приказами МЗ РФ по оснащению медицинских учреждений спейсеры входят в следующие стандарты оснащения:

- Стандарт оснащения пульмонологического отделения
- Стандарт оснащения отделения аллергологии и иммунологии

**Использование спейсеров proMEDANZ® в условиях стационара отвечает всем требованиям инфекционной безопасности.**

**Камеры/спейсеры proMEDANZ® в условиях клиники можно многократно химически дезинфицировать.**

**Таким образом обеспечивается безопасность использования данных систем в условиях медицинских учреждений.**

## КАМЕРА/СПЕЙСЕР АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ PROMEDANZ® S-MDI ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



КАМЕРА/СПЕЙСЕР  
АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ  
PROMEDANZ® S-MDI

арт. 683001



КАМЕРА/СПЕЙСЕР  
АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ  
PROMEDANZ® S-MDI

с маской для детей  
арт. 683002



КАМЕРА/СПЕЙСЕР  
АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ  
PROMEDANZ® S-MDI

с маской для взрослых  
арт. 683003

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЕЙСЕРОВ



МАСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

арт. 253006



МАСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

арт. 253007

Посетите наш сайт для получения  
дополнительной информации:  
[www.synmed.ru](http://www.synmed.ru)



ООО «СинерМед»  
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.49, а/я 15  
тел.: +7 (495) 718-75-91  
E-mail: [sales@synmed.ru](mailto:sales@synmed.ru)  
[www.synmed.ru](http://www.synmed.ru)



СОЗДАВАЯ НОВОЕ,  
СЛЕДУЕМ ТРАДИЦИЯМ



КАМЕРА/СПЕЙСЕР  
АЭРОЗОЛЬНАЯ КЛАПАННАЯ

# proMEDANZ® S-MDI

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДАИ

РЗН 2025/24683 от 05.02.2025

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

# КАМЕРА/СПЕЙСЕР *proMEDANZ*<sup>®</sup> S-MDI


«НАЖМИТЕ НА ДНО БАЛЛОНЧИКА И ОДНОВРЕМЕННО ВДОХНИТЕ ПРЕПАРАТ», так указано в инструкции к большинству дозирующих аэрозольных ингаляторов.

Однако многие люди испытывают трудности с координацией при одновременной инициации устройства, началом ингаляции и вдохом.

Часто неправильное проведение ингаляции приводит к тому, что большая часть медикамента осаждается в ротовой полости с последующим его проглатыванием.

Поэтому многие пациенты нуждаются в дополнительном устройстве – **СПЕЙСЕРЕ**, с помощью которого они могут использовать дозирующие аэрозольные ингаляторы более комфортно.

При использовании спейсера выполнение требования инструкции «Нажмите и дышите!» существенно облегчено и дозировка медикамента будет более точной.

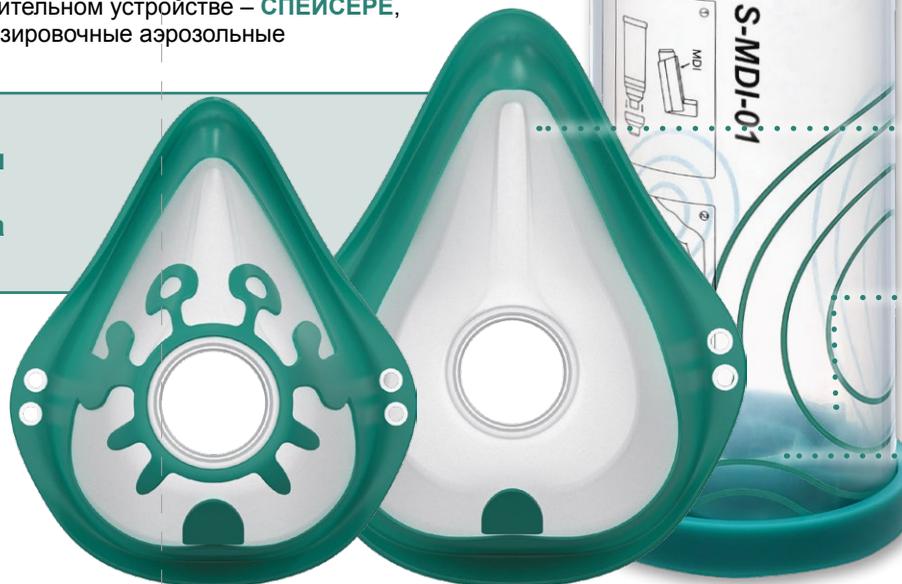

Антистатическая камера способствует лучшему дозированию медикамента



Для камеры возможна химическая дезинфекция и термодезинфекция (кипячение)



Прозрачный мундштук позволяет видеть движения клапана во время дыхания и помогает контролю терапии



Маски с клапаном выдоха сконструированы для плотного прилегания к лицу пациента, комфортны на ощупь, обеспечивают эффективную терапию без потери медикамента в окружающую среду



Силиконовые лопасти на адаптере для ДАИ способствуют созданию циклонического потока и обеспечивают лучшую доставку медикамента в дыхательные пути



Универсальный эластичный переходник совместим со всеми основными видами ДАИ



## РЕКОМЕНДАЦИИ ERS/ISAM

Для ингаляционной терапии маленьких детей и пациентов с плохой ингаляционной техникой, в случае использования ингаляционных глюкокортикостероидов через дозирующий аэрозольный ингалятор (ДАИ).



«При назначении лечения с дозирующими аэрозольными ингаляторами, особенно содержащими глюкокортикостероиды, следует удостовериться, что ингаляции проводятся с использованием пространственных камер – спейсеров, с целью снижения ротофарингиальной депозиции и предотвращения попадания медикамента в желудочно-кишечный тракт.»

[1] Laube B et al. 2011; Eur Respir J; 37(6):1308-31

## ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

**Краткое руководство.** Для более подробной информации прочитайте и следуйте инструкции по применению.

Необходимо очищать спейсер после каждого использования. Погрузите все части спейсера в теплую воду с добавлением моющего средства для посуды, и тщательно промойте. Тщательно прополощите все детали в чистой воде. Для дезинфекции поместите чисто вымытые детали спейсера в ёмкость с питьевой водой и прокипятите в течение 5 минут.



РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.